




LIGHT DRIVE 2.1

KORTE GEBRUIKSHANDLEIDING



← Follow us!

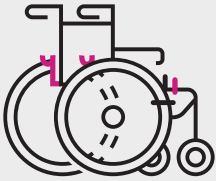


Uw rolstoel is voorzien van **profielen en haken** achterop waar u uw Light Drive makkelijk in kunt hangen.

Een **houder** aan de voorzijde van uw rolstoel is bedoeld voor de joystick.


1 DE LIGHT DRIVE BEVESTIGEN

1. Zet de rolstoel op de remmen om het bevestigen makkelijker te maken.
2. Zorg dat de 2 handvatten/hendels naar achteren wijzen (neutrale positie). Indien noodzakelijk, trek de zwarte  knop omhoog.
3. Pak de motor-unit bij de centrale hendel, en plaats de grijze assen in de haken.
4. Controleer dat de assen correct in de haken zitten.


2.

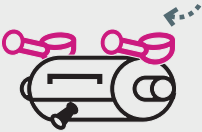

3.

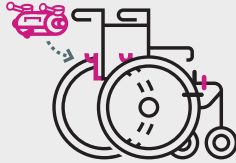


4.

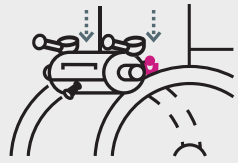


2 HENDELS VERGRENDELEN

1. Schuif beide hendels uit, zodat u makkelijker kracht kunt zetten.
2. Duw eerst de rechter hendel naar voren, daarna de linker.

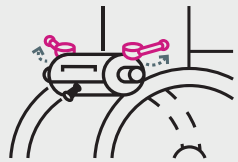



3 JOYSTICK PLAATSEN

1. Plaats de joystick in het houder aan de voorzijde van uw rolstoel
2. Zorg dat de kabel uit de joystick aan de binnenzijde van het spatbord loopt om schade aan de kabel te voorkomen.
3. Pas de hoogte van de joystick aan door de blokkering te verzetten (eruit draaien, en in een hoger of lager gaatje zetten).

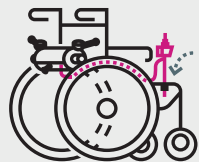


4 INSTALLEREN VAN HET ACCUPAKKET

1. Plaats het accupakket in de geleider onder de motor.
2. Duw stevig door totdat u de stekkers in elkaar hoort gaan met een 'klik'.

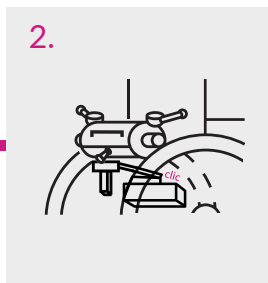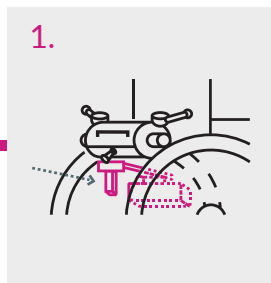


5 BEVESTIGEN ANTI-TIP WIEL

Schuif het anti-tip wiel in de achterste opvoer-greep totdat deze automatisch vergrendelt (het wieltje naar beneden laten wijzen).

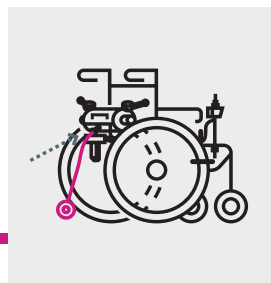

VRIJLOOP STAND

Zet uw Light Drive 2.1 eenvoudig in de vrijloop-stand. U kunt uw rolstoel dan weer met de hoepels rijden of door een begeleider geduwd worden.

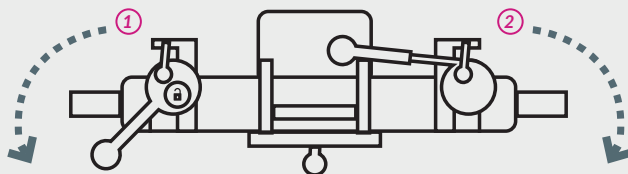


- ① Ontkoppel de linker hendel en draai deze naar achteren totdat deze tegen een nokje komt.
- ② Ontkoppel de rechter hendel en draai deze helemaal terug tot aan de rugleuning van de rolstoel

6 DE LIGHT DRIVE ERAF HALEN


Zet de rolstoel op de remmen om het verwijderen makkelijk te maken.

1. Hou de hendels op de motor vergrendeld.
 2. Verwijder het anti-tip wiel (wat u later aan het accupakket kunt klikken)
 3. Verwijder het accupakket door het naar achteren uit de geleider te trekken.
 4. Haal de joystick uit de houder, en plaats deze in een speciaal bevestigingspunt onderop de motor.
 5. Zet de vergrendelingshendels in de neutrale positie (= naar achteren wijzend). Zodra de linker hendel tegen het nokje loopt, trek dan aan zwarte  knop.
- Haal de motor van de rolstoel af door deze uit de haken te tillen.


1./2.

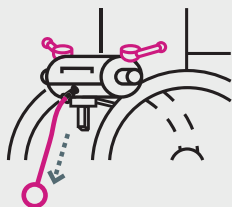

3.

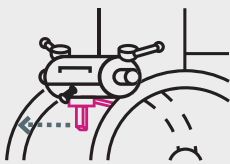


4./5.

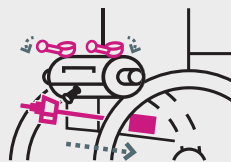


7 ACCU OPLADEN

Blijft het accupakket op de rolstoel,
verbind dan de oplader met de joystick

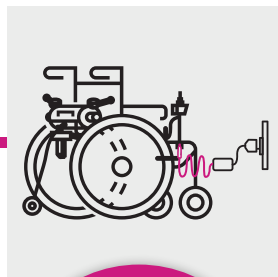

Is het accupakket los van de rolstoel,
verbind dan de oplader met de rode stekker
op het accupakket

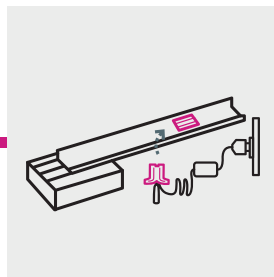

**Steek daarna de
stekker in het
stopcontact.
Zodra het
opladen klaar is,
haal de stekkers
er weer uit.**

**LEES OOK DE
UITGEBREIDE
HANDLEIDING**

voor instructies mbt
het rijden, veiligheid en
onderhoud.

**BENOIT
SYSTEMES**
Autonomy is power

FABRIKANT: BENOIT SYSTEMES
7 Rue du Pont, 21450 Billy Les Chanceaux FRANCE

WWW.MOBILITY-YOU.NL/LIGHTDRIVE